



Traveller - Manual

Magnificador de vídeo portátil

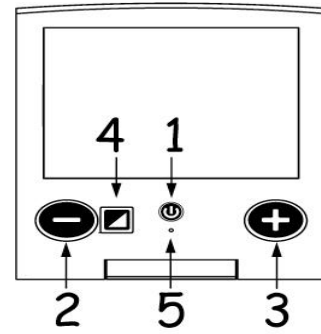

Índice

1. General
2. Instrucciones de seguridad
3. Contenido e instalación
4. Operación
5. Cambiar el ángulo de la pantalla
6. El escribir con el Traveller
7. Carga de las baterías
8. Conexión a una TV
9. Información técnica
10. Información del contacto

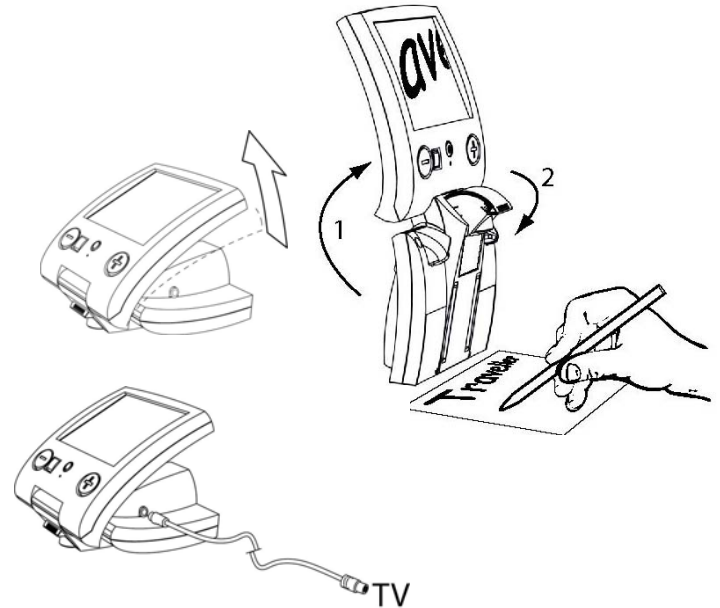

1. General

Felicitaciones por la compra de una lupa electrónica de tamaño bolsillo de alta calidad fabricada por Optelec. El equipo ha sido diseñado para ser utilizado en condiciones secas y no-industriales.

Este manual de usuario contiene información sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del equipo. Lea este manual de usuario detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo, prestando atención especial a las instrucciones de seguridad y mantenimiento, indicadas en las figuras de las páginas 2 y 3 del manual.

Se ha hecho todo el esfuerzo posible para que la información de este manual de usuario sea la correcta. Ni Optelec, ni Rehasoft, asume cualquier responsabilidad de errores o de daños resultando del uso incorrecto de la información contenida en este manual.

2. Instrucciones de seguridad

- No exponga el dispositivo al calor excesivo u ordene la luz del sol para evitar el riesgo del fuego.
- No quite ninguna parte del dispositivo. Entre en contacto con al personal de servicio autorizado de Optelec o a su distribuidor para mantener.
- Para evitar riesgo del daño eléctrico, guarde su dispositivo lejos de los líquidos y de productos químicos.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior (un paño de gamuza húmedo es ideal). Nunca utilice alcohol. Evite de limpiar o de aclarar con detergentes, que pueden dañar la lente.
- Maneje el dispositivo con cuidado. La dirección errónea dañará los componentes internos.

El uso del equipo a excepción de descrito en este manual excluirá el mismo de las condiciones de la garantía.

3. Contenido e instalación

Los puntos siguientes se incluyen con el dispositivo en la caja de empaquetado:

- 1 equipo
- 1 un bolso de protección
- 1 cable de transmisión con el adaptador
- 1 manual de usuario

Vea la figura en la página 3. Ponga el adaptador enchufan el Traveller y tapan el cable de transmisión del adaptador en el zócalo de pared. El Traveller es listo para utilizar ahora. La luz intermitente (página 4, no. 5) indica que las baterías internas están cargando. El dispositivo requiere 3 horas. El Traveller puede ser utilizado mientras tanto.

4. Operación

Poner en marcha el equipo

Apriete el botón anaranjado (.1) 1 La bombilla (5) se enciende continuamente. Presione este botón otra vez para dar vuelta al Traveller apagado. Lleva aproximadamente 1 minuto el brillo de plena pantalla del alcance. (Nota: cuando el Traveller está conectado con la alimentación principal, el LED guarda el centelleo, aunque el dispositivo este apagado)

Enfoque

Con "+" el botón (. 3) y "-" "APRIETE (2), usted puede ajustar su imagen a partir de 4.8 - 16 veces. Sujete el botón hacia abajo hasta que usted ha alcanzado el nivel deseado de la ampliación.

Cuando se alcanza la ampliación más alta o más baja, el zumbido para automáticamente.

Modo de lectura que cambia

El botón del modo (4) se utiliza para cambiar la imagen de pantalla. Presione este botón para accionar la palanca con los 3 modos de imagen. Usted puede elegir en medio:

- Modo a todo color de la foto
- Modo de texto con el contraste realzado (negro-blanco)
- Modo de texto realzado negativo (blanco-negro)

5. Cambiar el ángulo de la pantalla

Vea también la página 5.

La pantalla puede ser ajustada manualmente a cualquier ángulo según una postura correcta de la visión para evitar reflejos

6. Escribir con el Traveller

Vea también la página 6.

Para utilizar el Traveller para la escritura:

1. Incline la pantalla hasta el final para arriba
Ponga el montante del dispositivo, según las indicaciones de la figura en la página 6.
2. Tire de la cámara fotográfica que gira azul enteramente y cuidadosamente hacia fuera hasta que usted oye y se sienta un pitido El LED externo enciende (con.) automáticamente en esta posición.

El tamaño de la ampliación es fijo en 5 veces en la posición de la escritura.

Sostenga el Traveller con una mano mientras que la usa en la posición que escribe para conservar su estabilidad.

7. Carga de las baterías

Cuando el Traveller está conectado con el enchufe a la alimentación principal, las baterías internas se cargan automáticamente.

Las baterías recargables se pueden utilizar 2.5 horas continuamente. La luz ahora se enciende continuamente. Tan pronto como la luz se interrumpa cada dos segundos, las baterías necesitan ser recargadas. Conecte el Traveller con el enchufe de la alimentación

Para ahorrar energía, el Traveller dará vuelta automáticamente apagado si no se toca ningún botón en 20 minutos.

8. Conexión a un aparato de TV

Vea la figura en la página 7. Conecte el cable video externo con el viajero y con la entrada video en su TV. Cambie su TV al Sistema de pesos-modo. Refiérase también a la guía de la instalación del paquete accesorio.

9. Información técnica

Dimensiones 18 x 16 x 9.5 centímetros. Tamaño de pantalla 6.2 " (16 centímetros)

Batería uso continuo de 2.5 horas. Tiempo de la carga de la batería 3 horas

Peso 990 gramos

Ampliación 4.8 16 veces (Ampliación en la TV dependiendo del tamaño de pantalla de la TV)

Salida video NTSC, CA/50-60 hertzios del adaptador 90-240 V -18V, 2 amperios.

Precaución:

Riesgo de la explosión si las baterías no son las adecuadas. Las baterías usadas se deben depositar donde indique las autoridades competentes locales.

Condiciones de la operación y de almacenaje:

Humedad relativa: el < 70%, ninguna condensación

Temperatura: 0 ° C del - 35



Este producto se conforma con la seguridad y los requisitos de EMC de los directorios:

EEC 93/42, EN 1441, EN 12182, EN 60601-1-2, EN 60601-1



Este dispositivo lleva marca de la aprobación del CE, de la FCC y de la UL.

10. Información de contacto

Rehasoft
ACCESIBILIDAD PARA TODOS

Torrijos 23, 08012 Barcelona
Tel 932 198 065 Fax 932 136 736
www.rehasoft.com info@rehasoft.com